


AbTheraTM

Terapia en abdomen abierto

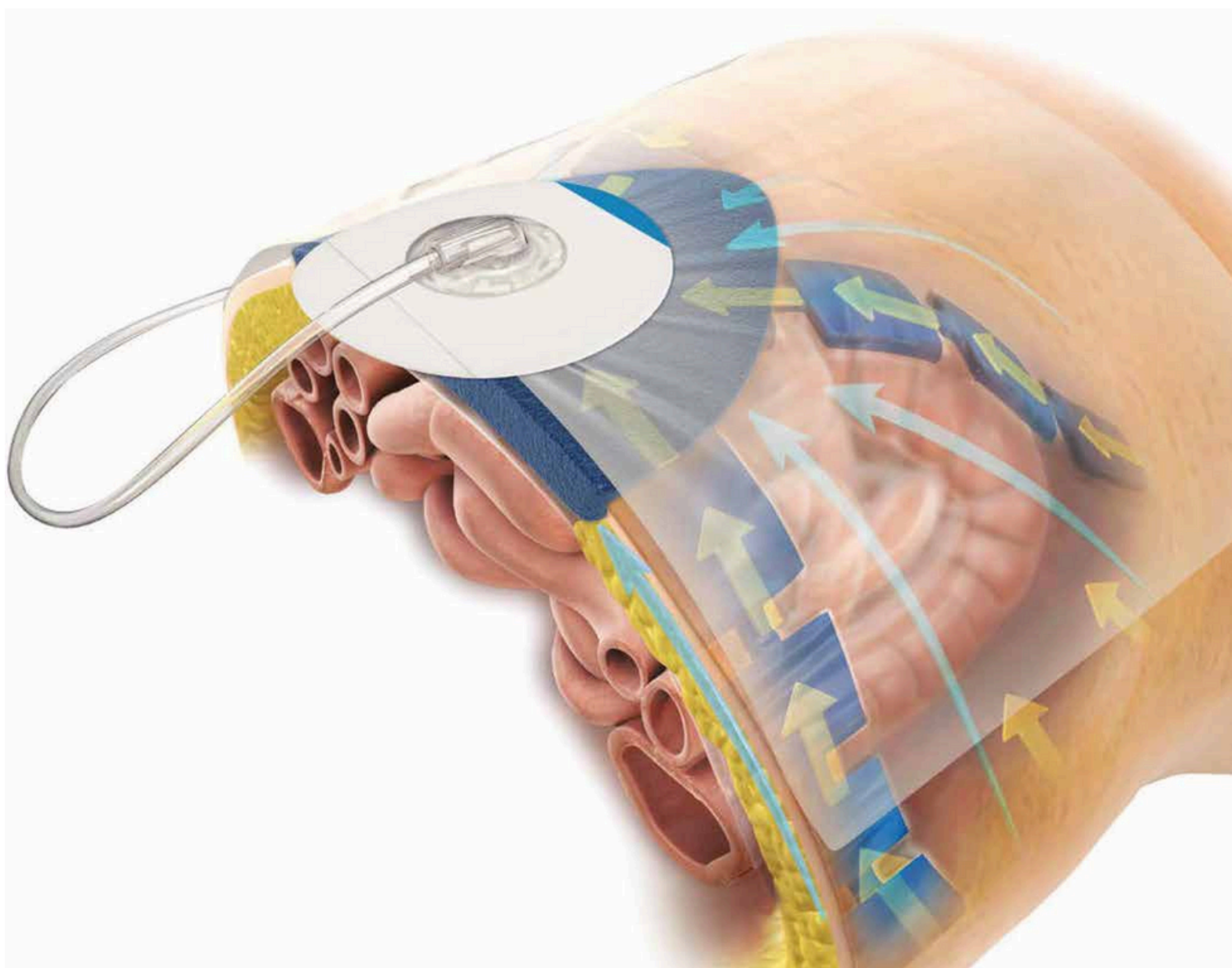

ABTHERA™ ADVANCE DE 3M™

El sistema de terapia de presión negativa para abdomen abierto AbThera™ de 3M™ está diseñado para el cierre abdominal temporal, proporcionando una capa protectora visceral y una espuma perforada para la extracción de fluidos y la distribución de presión negativa. Este dispositivo innovador facilita el tratamiento de la Síndrome de Compartimiento Abdominal (SCA) y promueve la protección de órganos internos y tejidos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- **Componentes:**

- Capa protectora visceral perforada AbThera™ de 3M™
- Espuma perforada AbThera™ Advance de 3M™
- Láminas Adhesivas V.A.C.® de 3M™
- Tecnología SensaT.R.A.C.™ de 3M™

- **Certificaciones:**

- Indicaciones específicas, contraindicaciones, advertencias y precauciones disponibles en las instrucciones del producto.

USOS:

- Cierre abdominal temporal en casos de sepsis, traumatismos y cirugía abdominal.
- Reducción de la mortalidad, disminución de la contaminación y edema intestinal, protección de la fascia y la piel.

PRECAUCIONES:

- No usar en pacientes con sensibilidad a los componentes del producto.

KIT INCLUYE:

- Capa protectora visceral perforada AbThera™ de 3M™
- 2 espuma perforada AbThera™ Advance de 3M™
- 4 Láminas Adhesivas V.A.C.® de 3M™
- Almohadilla y tubo SensaT.R.A.C.™ de 3M™

COMPONENTES DEL APÓSITO PARA ABDOMEN ABIERTO ABTHERA™ ADVANCE DE 3M™

Capa protectora visceral perforada AbThera™ de 3M™

Proporciona separación entre la pared abdominal y las vísceras, protegiendo el contenido abdominal. Presenta 6 brazos salientes de espuma encapsulada que ayudan en la eliminación de fluidos y a la distribución negativa en las profundidades de los surcos paracólicos. La terapia de presión negativa en abdomen abierto AbThera™ de 3M™ es el único sistema de TAC en los EE. UU. que cuenta con una capa protectora visceral con espuma encapsulada.

Tecnología SensaT.R.A.C.™ de 3M™

Nuestra tecnología patentada SensaT.R.A.C. proporciona un sistema de retroalimentación de presión en tiempo real que ajusta y controla la presión en el abdomen. Terapia de presión negativa en abdomen abierto AbThera™ de 3M™ es el único apósito para abdomen abierto diseñado para funcionar con V.A.C.® de 3M™ y su tecnología patentada SensaT.R.A.C.



Espuma perforada AbThera™ Advance de 3M™

Bajo presión negativa, la configuración única de la espuma perforada AbThera Advance está diseñada para colapsar a nivel medial mientras mantiene su rigidez vertical.

Láminas Adhesivas V.A.C.® de 3M™

Proporciona un sistema cerrado para ayudar a aislar y proteger el contenido abdominal del entorno externo.