

# Sistema de Terapia

## 3M<sup>TM</sup> Prevena<sup>TM</sup>

para el Manejo de Incisiones



**3M** + KCI<sup>TM</sup>

## SISTEMA DE TERAPIA 3M<sup>TM</sup> PREVENA<sup>TM</sup> PARA EL MANEJO DE INCISIONES

La terapia 3M<sup>TM</sup> Prevena<sup>TM</sup> está diseñada para tratar incisiones quirúrgicas y tejidos circundantes en pacientes con riesgo de desarrollar complicaciones postoperatorias, incluyendo infecciones en el sitio quirúrgico. Este sistema aplica presión negativa continua de -125 mmHg durante un mínimo de 2 días y un máximo de 7 días.

### APLICACIONES RECOMENDADAS:

El sistema Prevena<sup>TM</sup> se utiliza en cirugías con alto riesgo de complicaciones como esternotomías, cesáreas, histerectomías abiertas, artroplastia de cadera y rodilla, fracturas de reducción abierta, bypass de extremidades inferiores, trasplantes renales y reconstrucción mamaria.

### COMPONENTES DEL SISTEMA:

- **Unidad de Terapia Prevena<sup>TM</sup> 125:** Terapia portátil de un solo uso, resistente a salpicaduras de agua, con alarmas audibles y visuales.
- **Apósitos Prevena<sup>TM</sup>:** Diferentes tamaños para adaptarse a las necesidades específicas de cada incisión.
- **Accesorios Prevena<sup>TM</sup>:** Bolsa de transporte, cánister de diferentes capacidades y adaptadores de conexión.

### BENEFICIOS:

- Ayuda a mantener unidos los bordes de la incisión.
- Remueve fluidos y contenidos infecciosos.
- Reduce el edema.
- Protege la incisión de contaminantes externos.


### CERTIFICACIONES:

- Libre venta otorgado por FDA.
- ISO 13485-2016 emitido por BSI.
- Certificación de no látex y esterilidad por 3M.


### PRECAUCIONES:



- No utilizar en heridas infectadas, isquémicas, dehiscentes o abiertas.
- Precaución en pacientes con tratamientos anticoagulantes.
- No utilizar en pacientes con sensibilidad a la plata y/o acrilatos.

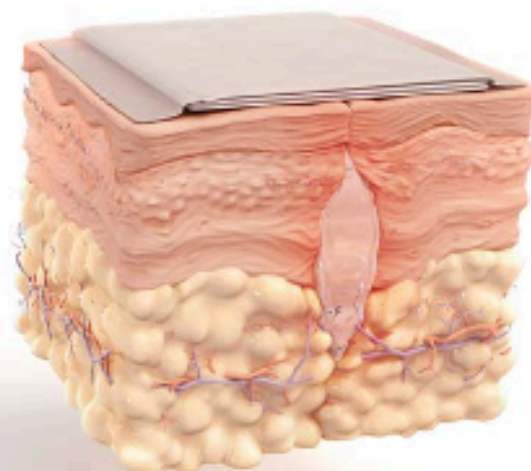Terapia pasiva

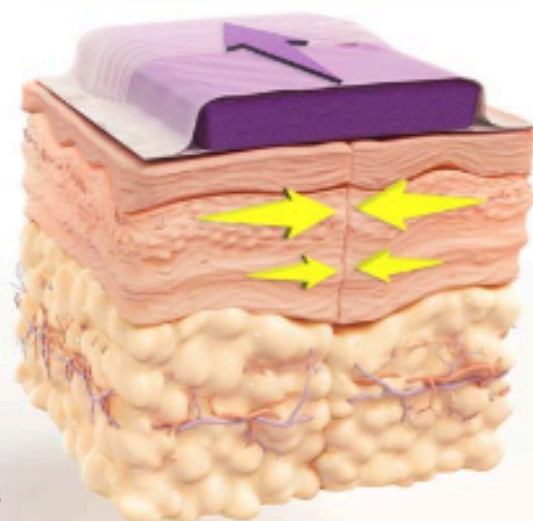

Terapia Prevena



 Dirección del líquido  
 Fuerza de aposición

## GUÍA DE SELECCIÓN:



### PREVENA™ Unidad de terapia 125

**Compatible con:**

- Apósito PREVENA™ 13cm
- Apósito PREVENA™ 20cm
- Sistema PREVENA DUO™



### PREVENA PLUS™ Unidad de terapia 125

**Compatible con:**

- Apósito PREVENA™ 35cm
- Sistema PREVENA PLUS™ customizable

### Apósito PREVENA™ PEEL & PLACE™ – 13cm

Para incisiones lineales de hasta 13cm de longitud.



### Apósito PREVENA™ PEEL & PLACE™ Dressing – 35cm

Para incisiones lineales de hasta 35cm de longitud.



### Apósito PREVENA™ PEEL & PLACE™ – 20cm

Para incisiones lineales de hasta 20cm de longitud.



### Apósito CUSTOMIZABLE™

Para incisiones lineales y no lineales de hasta 90cm de longitud.



## SISTEMAS DE TERAPIA PREVENA<sup>TM</sup>

### Sistema de Terapia PREVENA<sup>TM</sup> PEEL & PLACE<sup>TM</sup>



- Ideal para pacientes ambulatorios o pacientes que puedan darse de alta
- Terapia portátil de un solo uso
- hasta 7 días de duración
- Incluye bolsa de transporte para el paciente
- Resistente a salpicaduras de agua
- Alarmas audibles y visuales

### Sistema de Terapia PREVENA PLUS<sup>TM</sup>



MEDIDAS	REF	CONTENIDO
13cm	PRE1101	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x Unidad de terapia PREVENA<sup>TM</sup> 125</li> <li>• 1 x Apósito PREVENA<sup>TM</sup> PEEL &amp; PLACE<sup>TM</sup> de 13cm</li> <li>• 1 x Conexión V.A.C.<sup>®</sup></li> </ul>
20cm	PRE1001	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x Unidad de terapia PREVENA<sup>TM</sup> 125</li> <li>• 1 x Apósito PREVENA<sup>TM</sup> PEEL &amp; PLACE<sup>TM</sup> de 20cm</li> <li>• 1 x Conexión V.A.C.<sup>®</sup></li> </ul>
35cm	PRE3201	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x Unidad de terapia PREVENA<sup>TM</sup> 125</li> <li>• 1 x Apósito PREVENA<sup>TM</sup> PEEL &amp; PLACE<sup>TM</sup> de 35cm</li> <li>• 1 x Conexión V.A.C.<sup>®</sup></li> </ul>
90cm	PRE4001	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x Unidad de terapia PREVENA<sup>TM</sup> PLUS 125</li> <li>• 1 x Apósito PREVENA<sup>TM</sup> CUSTOMIZABLE<sup>TM</sup> de 90cm</li> <li>• 1 x Interfaz de presión SENSAT.R.A.C.<sup>TM</sup></li> </ul>
DUO <sup>TM</sup> 13cm / 13cm	PRE1121	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x Unidad de terapia PREVENA<sup>TM</sup> 125</li> <li>• 2 x Apósito PREVENA<sup>TM</sup> PEEL &amp; PLACE<sup>TM</sup> de 13 cm</li> <li>• 1 x Conexión en Y PREVENA<sup>TM</sup></li> <li>• 2 x Conexión V.A.C.<sup>®</sup></li> </ul>

### Apósitos de Terapia PREVENA<sup>TM</sup>

V.A.C.ULTA<sup>TM</sup> y ACTI.V.A.C.<sup>TM</sup>



- Compatible con la unidad V.A.C. ULTA<sup>TM</sup> en un entorno hospitalario
- Compatible con la unidad ACTI.V.A.C.<sup>TM</sup> en pacientes ambulatorios

MEDIDAS	REF	CONTENIDO
13cm	PRE1155	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 x Apósitos PREVENA<sup>TM</sup> PEEL &amp; PLACE<sup>TM</sup> 13cm</li> </ul>
20cm	PRE1055	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 x Apósitos PREVENA<sup>TM</sup> PEEL &amp; PLACE<sup>TM</sup> 20cm</li> </ul>
35cm	PRE3255	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 x Apósitos PREVENA<sup>TM</sup> PEEL &amp; PLACE<sup>TM</sup> 35cm</li> </ul>
90cm	PRE4055	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 x Apósitos PREVENA<sup>TM</sup> CUSTOMIZABLE<sup>TM</sup> 90cm con SENSAT.R.A.C.<sup>TM</sup></li> </ul>

### Accesorios Terapia PREVENA<sup>TM</sup>

de Izda a dcha: Cánister 45ml Cánister 150ml Conector V.A.C.<sup>®</sup>



- Solicite un cánister adicional para heridas con un alto exudado
- Adaptador de conexión para V.A.C.<sup>®</sup>

MEDIDAS	REF	CONTENIDO
45ml Cániste	PRE1095	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 x Cánister PREVENA<sup>TM</sup> 45ml</li> </ul>
150ml Cániste	PRE4095	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 x Cánister PREVENA PLUS<sup>TM</sup> 150ml</li> </ul>
V.A.C.Conector	PRE9090	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 x Conexiones V.A.C.<sup>®</sup></li> </ul>

## INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

N° DE ART	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
PRE1001US	3M™ Prevena™ Peel & Place™ Kit del Sistema: 20 cm	1 unidad
PRE1055US	3M™ Prevena™ Peel & Place™ Apósito: 20 cm	Caja de 5
PRE1101US	3M™ Prevena™ Peel & Place™ Kit del Sistema: 13 cm	1 unidad
PRE1155US	3M™ Prevena™ Peel & Place™ Apósito: 13 cm	Caja de 5
PRE3201US	3M™ Prevena Plus™ Peel & Place™ Kit del Sistema de 35 cm	1 unidad
PRE3255US	3M™ Prevena Peel & Place™ Apósitos de 35 cm	Caja de 5
PRE4001US	3M™ Prevena Plus™ Customizable™ Kit del Sistema	1 unidad
PRE4055US	3M™ Prevena Plus™ Customizable™ Apósito	Caja de 5
PRE1121US	3M™ Prevena Duo™ System with Peel & Place™, Apósitos de 13 cm/13 cm	1 unidad
PRE3321US	3M™ Prevena Plus Duo™ System with Peel & Place™, Apósitos de 13 cm/20 cm	1 unidad
PRE3021US	3M™ Prevena Plus Duo™ System with Peel & Place™, Apósitos de 20 cm/20 cm	1 unidad
PRE4000US	3M™ Prevena Plus™ 125 Unidad de Terapia	1 unidad
PRE1095	3M™ Prevena™ Recipiente de 45 ml	Caja de 5
PRE4095	3M™ Prevena Plus™ Recipiente de 150 ml	Caja de 5
PRE9090	3M™ Prevena™ Therapy V.A.C.® Conector	Caja de 10